

**Porte-flacon d'hémoculture VACUETTE<sup>®</sup>**

## Mode d'emploi

**Utilisation :** Le porte-flacon d'hémoculture **VACUETTE<sup>®</sup>** est utilisé pour les prélèvements sanguins de routine effectués quotidiennement. Le porte-flacon d'hémoculture est utilisé pour le prélèvement de sang dans des flacons d'hémoculture et des tubes.

Ce produit doit exclusivement être utilisé par un personnel compétent et dans le respect du présent mode d'emploi.

**Description du produit :** Le porte-flacon d'hémoculture **VACUETTE<sup>®</sup>** est un produit stérile à usage unique en matière plastique. Il est compatible avec tout adaptateur Luer **VACUETTE<sup>®</sup>** et tout kit de prélèvement sanguin / tout kit de prélèvement sanguin de sécurité **VACUETTE<sup>®</sup>**.

**Application**

**REMARQUE :** Pour de plus amples informations concernant les kits de prélèvement sanguin / les kits de prélèvement sanguin de sécurité ou les adaptateurs Luer, veuillez consulter les modes d'emploi de ces produits.

**L'observation du mode d'emploi garantit le bon fonctionnement du dispositif.**

*Portez des gants durant le prélèvement sanguin et durant la manipulation des tubes de prélèvement sanguin afin de minimiser le risque d'exposition au sang.*

- Vissez l'adaptateur Luer et le kit de prélèvement sanguin / le kit de prélèvement sanguin de sécurité dans le porte-flacon d'hémoculture **VACUETTE<sup>®</sup>**. Assurez-vous que l'adaptateur Luer est bien serré et ne risque pas de se détacher durant l'utilisation.

**REMARQUE :** Si l'adaptateur Luer n'est pas correctement vissé, les filets peuvent être endommagés. Cet endommagement risque d'entraîner un détachement de l'adaptateur Luer durant le prélèvement de sang.

- Nettoyez le site de ponction et vos mains conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur de votre établissement.
- Désinfectez le site de ponction des flacons d'hémoculture avec une compresse imbibée d'alcool et laissez sécher l'alcool à l'air.
- Procédez à la ponction veineuse en inclinant le bras du patient vers le bas. Pendant le prélèvement, les flacons d'hémoculture et les tubes de prélèvement sanguin doivent rester en position droite à tout moment.

**REMARQUE :** Pour une utilisation adéquate des flacons d'hémoculture, veuillez observer le mode d'emploi du producteur.

Présentez le porte-flacon sur le flacon d'hémoculture et pressez-le vers le bas.

*Si vous utilisez des flacons anaérobies et aérobies, commencez par ponctionner le flacon aérobie avant de continuer par le flacon anaérobie.*

- Après le prélèvement de la quantité de sang appropriée, retirez le porte-flacon du flacon et (si nécessaire) continuez le prélèvement de sang avec des tubes de prélèvement sanguin **VACUETTE<sup>®</sup>**.
- Une fois le prélèvement de sang terminé, maintenez la compresse sur le site de ponction avec une main.
- Si vous utilisez un kit de prélèvement sanguin de sécurité, déverrouillez le coulisseau de l'aiguille à ailettes en appuyant sur le mécanisme de sécurité des deux côtés. Glissez le mécanisme de sécurité vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic parfaitement audible. Ce clic indique que le mécanisme de sécurité a été correctement activé.
- Éliminez le kit de prélèvement sanguin de sécurité avec le porte-flacon dans un container d'élimination approprié conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur de votre établissement.
- Si vous utilisez un kit de prélèvement sanguin, éliminez-le avec le porte-flacon dans un container d'élimination approprié conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur de votre établissement.  
*Remarque : Veillez à ce que vos mains se trouvent derrière l'aiguille à tout moment pendant l'utilisation et l'élimination du produit.*
- La pression exercée sur le site de ponction doit répondre aux prescriptions de sécurité en vigueur sur place.

**REMARQUE :** Veillez à ne pas exercer une pression trop forte sur le site de ponction.

**VACUETTE<sup>®</sup> Instructions de sécurité et précautions****Instructions de sécurité**

- Contrôlez chaque produit avant l'utilisation pour constater d'éventuels dommages. Ne jamais utiliser un produit endommagé !
- Tout porte-flacon d'hémoculture **VACUETTE<sup>®</sup>** contaminé avec du sang est considéré comme potentiellement infectieux et doit être éliminé immédiatement dans les containers d'élimination prévus à cet effet.

- Une fois activé, ne relâchez et ne réactivez jamais par la force le mécanisme de sécurité.
- Ne recapuchonnez jamais les aiguilles.
- Éliminez le porte-flacon d'hémoculture **VACUETTE®** utilisé immédiatement dans les containers d'élimination prévus à cet effet.
- Veillez à ce que vos mains se trouvent derrière l'aiguille à tout moment pendant l'utilisation et l'élimination du produit.

#### Précautions

- Tout échantillon biologique et tout instrument de prélèvement de sang (par exemple lancettes, aiguilles, adaptateurs Luer et kits de prélèvement sanguin) doit être manipulé conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Le VHB, le VHC, le VIH et d'autres maladies infectieuses peuvent être transmis par le contact avec des échantillons biologiques. En cas d'exposition à des échantillons biologiques entraînant un risque d'infection, le recours immédiat à des soins médicaux est recommandé.
- Pour l'élimination des kits de prélèvement sanguin de sécurité avec porte-flacon d'hémoculture utilisés et des kits de prélèvement sanguin avec porte-flacon d'hémoculture utilisés, servez-vous des containers d'élimination prévus à cet effet.
- Portez des gants durant le prélèvement sanguin et durant la manipulation des tubes de prélèvement sanguin afin de minimiser le risque d'exposition au sang.

#### Stockage





Température de stockage conseillée : entre 4 et 36° C (entre 40 et 97° F).

**REMARQUE :** Evitez le contact direct avec la lumière du soleil. Le dépassement de la température maximale de stockage conseillée peut porter atteinte à la qualité du porte-flacon.

#### Élimination


- Respectez les prescriptions générales d'hygiène et les instructions légales en vigueur pour l'élimination des matériels infectieux.
- Le port de gants permet de minimiser le risque d'infection.
- Les tubes de prélèvement sanguin contaminés ou utilisés doivent être jetés dans des containers d'élimination appropriés aux matériels potentiellement infectieux.
- Normalement, l'élimination a lieu dans des installations d'incinération appropriées ou par autoclavage (stérilisation par vapeur).
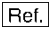
#### Informations sur l'étiquette, sur l'emballage intérieur (sachet) et sur le carton extérieur.

	Référence d'article
	Numéro de charge, numéro de lot
	Date de péremption : Le produit peut être utilisé jusqu'à la fin du mois indiqué.
	Symbole de « Produit à utilisation unique »

<b>Références :</b>
CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute) H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition M47-A Principles and Procedures for Blood Cultures; Approved Guideline

Caution: US Federal law restricts this device for sale by or on the order of a physician.

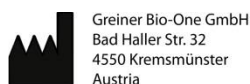

Made in Austria